


MARK PRO

Zaino professionale di soccorso

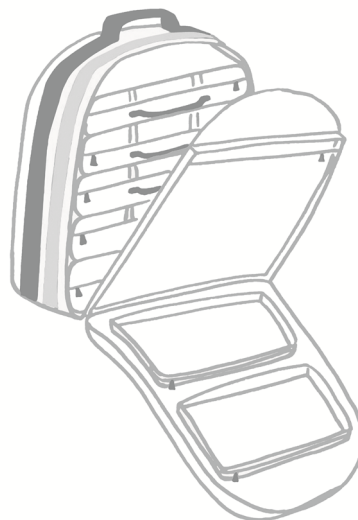

Zaino professionale caratterizzato da estrema versatilità grazie alla disposizione parti interne, alla protezione offerta al contenuto e alla duplice modalità di trasporto.

Caratteristiche specifiche

Dotato di due maniglie per consentirne il trasporto anche come se fosse una borsa. Le maniglie sono nella parte alta e in quella laterale

1 tasca esterna con chiusura a zip nella parte bassa e 1 frontale con accesso laterale

2 tasche esterne con chiusura a zip per radio portatile o cellulare

3 Tasche trasparenti con chiusura a zip ricavate sul lato interno del vano principale dello zaino

Divisore interno dotato di due grosse tasche con chiusura a zip di cui una trasparente

2 tasche trasparenti con chiusura a zip sul lato interno della patta anteriori

Schienale rinforzato con profili in alluminio

Imbottitura del vano principale per offrire maggior protezione al contenuto

Base dello zaino in PVC per limitare l'accumulo di sporco e agevolare la pulizia

Spallacci imbottiti e regolabili in altezza, con cintura toracica e addominale con fibbia a sgancio rapido per una miglior distribuzione dei pesi che gravano sull'operatore

Schienale con imbottiture nelle zone di maggior appoggio rivestite con tessuto traspirante

Inseri rifrangenti per aumentare la visibilità

Accessori di serie

CB00406A	M1 - Sacca blu per intubazione adulto
CB00402A	M2 - Sacca verde per intubazione pediatrica
CB00403A	M3 - Sacca giallo/rossa per somminist. e farmaci
CB00404A	M4 - Sacca arancio per infusione
CB00405A	M5 - Sacca nera per ventilazione

Dati tecnici

Dimensioni	360x520x300±10 mm
Peso solo zaino	3,13 ± 0,03 kg
Peso totale	4,85 ± 0,03 kg
Volume zaino	38 ± 1 l
Portata	30 kg
Materiali	Nylon, PE, PVC

MARK PRO - ZAINO PROF. ROSSO/NERO
C/5 SACCHE
CB00465B

Rev.0 (29/06/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it