


Dolphin

Salvagente lineare universale

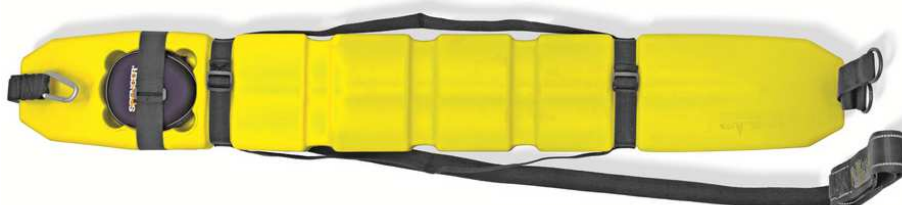

Salvagente lineare per il supporto al galleggiamento delle vittime durante le operazioni di salvataggio in acqua. Circondando l'addome della vittima incosciente, ne consente il galleggiamento in posizione supina.

Caratteristiche specifiche

- Il corpo segmentato facilita la presa e consente di avvolgere meglio il corpo della vittima
- La fascia di traino integrata nel galleggiante, garantisce elevata affidabilità
- La larghezza della tracolla offre maggior comfort al soccorritore
- Moschettone e anelli di chiusura in metallo
- Le maniglie offrono maggior versatilità di impiego
- La maschera facciale incorporata consente di effettuare in piena sicurezza le manovre di rianimazione

Accessori di serie

TA09050A | flex mask c/box blu logo spencer

Accessori opzionali

DY32401B | Sacca alta visibilità con rifrangente

Dati tecnici

Dimensioni corpo galleggiante	1200x175x85 ± 10 mm
Lunghezza fascia traino	2200 mm
Larghezza fascia traino	30mm / 50mm tracolla
Materiali	PE esp, Nylon
Peso	2,1 ± 0,1 kg
Spinta di galleggiamento minima	100 N

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DOLPHIN - SALVAGENTE
LIN.UNIV.C/FLEX M.E MANIGLIE
DY32500D



Classificazione CND | V9099

Identificativo registrazione | 887374

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it