


Rock Pin Max

Tavola spinale con pin

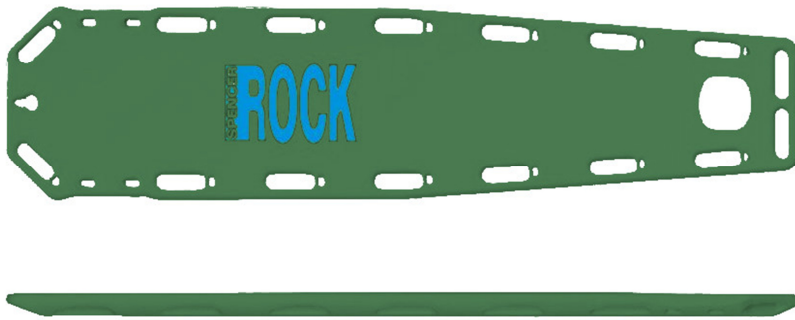

La tavola spinale Spencer Rock Pin Max è un dispositivo per il recupero, immobilizzazione e trasferimento verso la barella, di pazienti con sospette lesioni della colonna vertebrale. Questa particolare versione è caratterizzata da una portata maggiorata.

Caratteristiche specifiche

Il numero elevato di maniglie, il loro posizionamento e la loro conformazione, agevola la presa anche in condizioni difficili
 La forma rastremata consente di minimizzare gli ingombri e di alloggiarla all'interno delle barelle basket Spencer
 Asole dedicate al fissaggio di cinture e fermacapo Spencer
 Superfici lisce e raccordate per garantire efficace igienizzazione
 Struttura robusta e leggera per garantire elevata resistenza agli urti
 Permette l'esecuzione delle indagini diagnostiche preliminari ai raggi X

Accessori opzionali

ST02105A	Fix board - fissaggio verticale tavole spinali 10g
ST02108A	Fix board - fissaggio orizzont tavole spinali 10g
ST02015A	Pin Straps- sistema di cinture con ganci
ST02035A	Rock straps - sist. Cinture univers. Tav. Spinale
SH00200A	Spencer contour - fermacapo univers. Anat. Blu
ST02106A	Mark Up – sistema di personalizz. permanente

Dati tecnici

Dimensioni	1840x445x50 ± 10 mm
Materiale	PE, PU
N° maniglie	16
N° pin	14
Capacità di carico	350 kg
Peso	7,3 ± 0,1 kg

Class I Med.Device according to Dir. 93/42/CEE

ROCK PIN MAX- TAVOLA SPINALE
 MILITARY CON PIN

ST02114B

Classificazione CND



V0804

Rev.1 (19/03/2019)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it